

怎样做新冠病毒測試


使用 QuickVue家用新冠病毒自測盒

有關須知

這是一個使用QuickVue家用新冠病毒自測盒的使用指南。請查看盒內“使用說明書”及“病人須知”獲得完整資訊。該產品已通過FDA 授權，可於緊急情況下進行新冠病毒測試。



請前往以下鏈接，觀看如何使用測試盒視頻
quickvueathome.com/#video_testkit-2

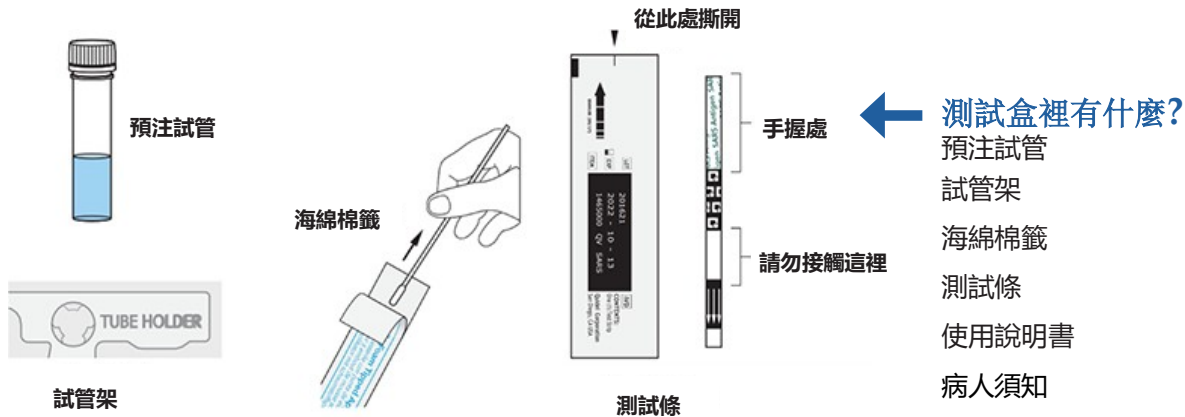

您還需要什麼?

鐘錶或計時器 (自測盒內不含)
測試時嚴格按**要求時間**造作是**非常重要**



開始測試

請洗乾淨雙手，將測試盒平放於乾淨的表面。
確保室內光線良好。如若給他人測試，請務必**戴上口罩**。


打開測試盒，確認盒內包含上述所有物品。
使用**計時器或鐘錶**並嚴格遵照另一面的**測試步驟**。



測試

1



取下試管帽，置於試管架上。

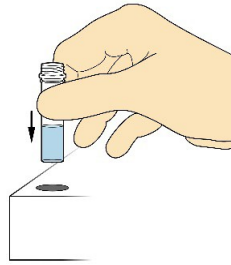

請勿接觸棉籤頭

2

撕開棉籤包裝，切勿接觸棉籤頭。

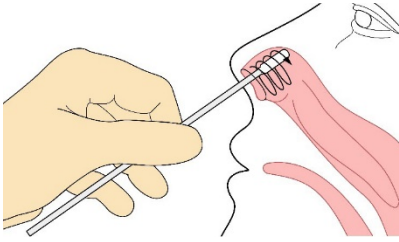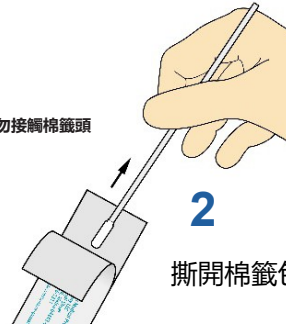


3

將棉籤插入一側鼻孔約1/2 至3/4 英寸深，於鼻腔內壁處旋轉擦拭至少4次。
使用同一棉籤，插入另一側鼻孔，重複上述動作。這一過程約須15秒鐘。


4

鼻腔取樣完畢後立即將棉籤插入試管中，務必使棉籤接觸到試管底部。攪動棉籤3-4次。

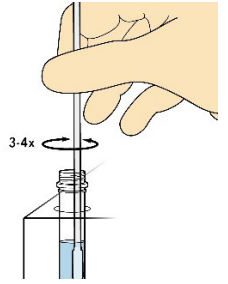


5

將棉籤留置試管內至少一分鐘。（使用鐘錶或者計時器）。留置時間過長或過短都可導致結果不準確。

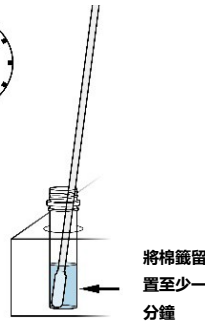

將棉籤留置至少一分鐘

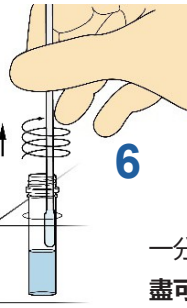

6


一分鐘後取出棉籤，在試管內壁上擠壓棉籤，盡可能擠出所有液體。然後扔掉棉籤。

7

打開測試條包裝，小心將測試條插入試管，注意箭頭朝下。測試條留置10分鐘（請使用鐘錶或計時器）。




測試條留置至少10分鐘

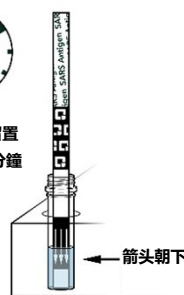

箭頭朝下


8

10 分鐘後，立即從試管中取出測試條，置於光線良好處讀取結果。如果您等待時間比規定多於5分鐘以上，有可能出現錯誤測試結果或者檢測無效。

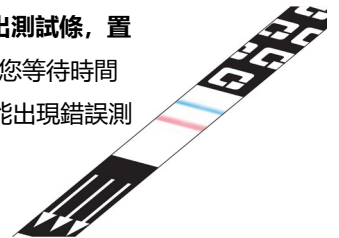

讀取測試結果

可出現以下三種結果：陽性，陰性和無效，也就是說測試失敗。

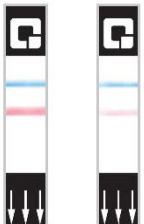

陽性結果 =

1 粉線 + 1 藍線 您有很大機率感染了新冠病毒，您應自我隔離。如果您有干擾您或令您擔憂的症狀，請聯繫您的家庭醫生。



陰性結果 =

1 藍線 您沒有感染新冠病毒。但若您有干擾您或令您擔憂的症狀，請聯繫您的家庭醫生。



無效結果 =

1 粉線或沒有線。您需要重新測試。使用新的試管，棉籤，測試條，重新再做一次測試。若連續兩次測試無效，請致電 1-833-784-2588。