

# Cách Xét Nghiệm COVID-19


Sử dụng bộ kit *QuickVue At-Home OTC COVID-19 Test*

## GIỚI THIỆU


Đây là bản hướng dẫn ngắn về cách sử dụng bộ kit *QuickVue At-Home OTC COVID-19 Test*. Để biết thông tin đầy đủ, vui lòng tham khảo Tờ hướng dẫn và Tờ thông tin dành cho bệnh nhân trong bộ kit. Sản phẩm này có Giấy phép Sử dụng Khẩn cấp của FDA.



Để xem video về cách xét nghiệm, hãy vào trang web [quickvueathome.com/#video\\_testkit-2](https://quickvueathome.com/#video_testkit-2)

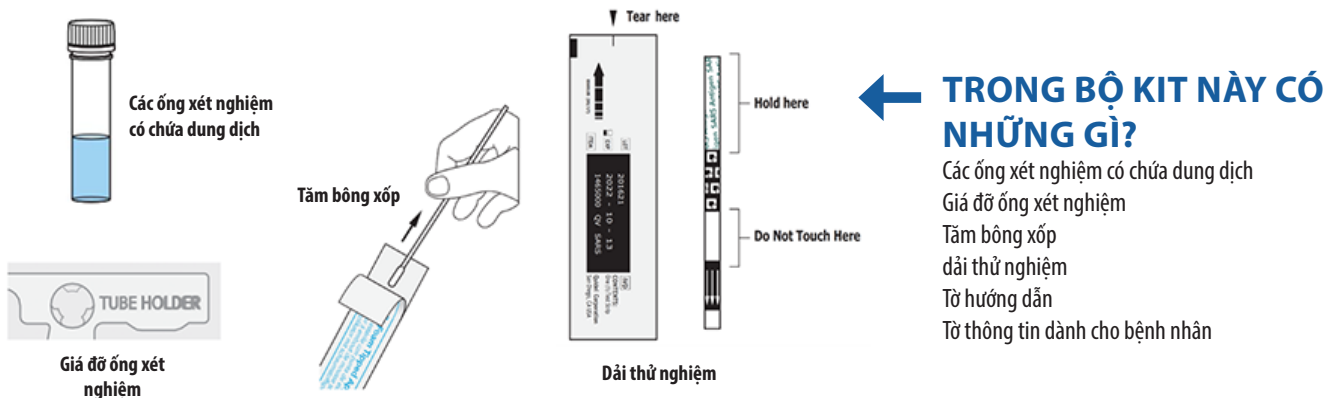

**QUÝ VỊ CÒN CẦN GÌ NỮA?**  
Đồng hồ hoặc bộ kit hẹn giờ (không bao gồm)  
Quan trọng nhất là quý vị phải căn giờ thật chính xác khi thử nghiệm!

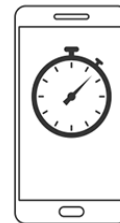

## ĐỂ BẮT ĐẦU XÉT NGHIỆM


Rửa tay và đặt bộ kit trên bề mặt phẳng và sạch. Hãy đảm bảo có đủ ánh sáng trong căn phòng. Nếu quý vị đang xét nghiệm cho người khác, hãy đeo khẩu trang. Mở bộ kit và đảm bảo tất cả các món được liệt kê ở trên đều có đủ. Lấy bộ hẹn giờ hoặc đồng hồ của quý vị và làm theo hướng dẫn từng bước ở bên trang kia.



# Làm xét nghiệm

1

Mở nắp của một ống xét nghiệm và đặt vào giá đỡ.

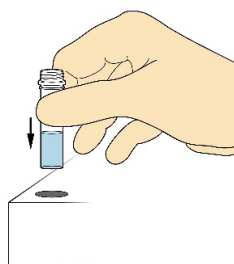

KHÔNG CHẠM VÀO ĐẦU CỦA TĂM BÔNG.


2

Mở lớp giấy bọc khỏi tăm bông. **Không chạm vào đầu của tăm bông.**




3

Đưa tăm bông vào một lỗ mũi khoảng 1/2 đến 3/4 inch và xoay tăm bông ít nhất 4 lần vào thành mũi. **Sử dụng cùng một tăm bông**, lặp lại ở lỗ mũi bên kia. Quá trình này sẽ mất khoảng 15 giây.

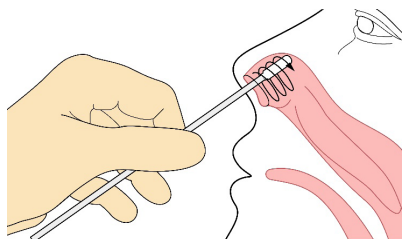


4

Ngay sau khi lấy mẫu từ mũi, đặt tăm bông vào ống xét nghiệm đã mở. Đảm bảo tăm bông chạm vào đáy của ống xét nghiệm. Khuấy tăm bông 3 hoặc 4 lần.

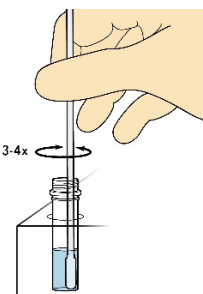


5

Đặt tăm bông trong ống xét nghiệm **ít nhất 1 phút**. (Dùng bộ hẹn giờ hoặc đồng hồ!) Nếu quý vị để tăm bông quá nhanh hoặc quá lâu thì kết quả có thể sai.

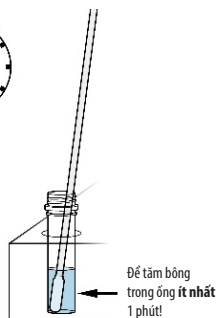

6

Sau 1 phút, lấy tăm bông ra khỏi ống, **cọ xát đầu tăm bông vào thành ống để vắt ra càng nhiều dung dịch càng tốt**. Vứt tăm bông đi.

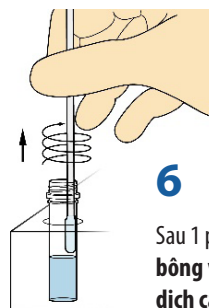

7

Mở bao chứa Dải thử nghiệm cẩn thận và đặt vào trong ống thử nghiệm đã mở có **mũi tên chỉ xuống**. Để dải thử nghiệm trong ống **10 phút**. (Dùng bộ hẹn giờ hoặc đồng hồ!)



Đặt dải thử nghiệm trong ống ít nhất 10 phút.




8

Sau 10 phút, lấy dải thử nghiệm ra khỏi ống và đặt trên bề mặt phẳng, có ánh sáng. **Đọc ngay Dải thử nghiệm!** Nếu quý vị đợi lâu hơn 5 phút để đọc, quý vị có thể nhận kết quả sai hoặc không hợp lệ.



## Cách đọc kết quả xét nghiệm của quý vị

Sẽ có 3 loại kết quả xét nghiệm: **Dương tính**, **Âm tính** hoặc là **không hợp lệ**, là kết quả không thể dùng được.

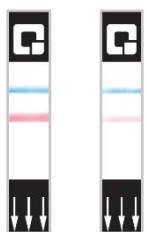

**KẾT QUẢ DƯƠNG TÍNH = 1 vạch màu hồng + 1 vạch màu xanh lam**

Quý vị có **khả năng** bị nhiễm COVID-19 cao. **Quý vị nên tự cô lập**. Nếu quý vị có các triệu chứng gây khó chịu hoặc lo lắng, hãy liên lạc với bên cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế của quý vị.



**KẾT QUẢ ÂM TÍNH = 1 vạch màu xanh lam**

Quý vị **không có khả năng** bị nhiễm COVID-19. Nếu quý vị có các triệu chứng gây khó chịu hoặc lo lắng, hãy liên lạc với bên cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế của quý vị.



**KẾT QUẢ KHÔNG HỢP LỆ = 1 vạch màu hồng hoặc KHÔNG có vạch**

Quý vị cần phải **làm xét nghiệm mới**. Bắt đầu lại từ đầu bằng cách sử dụng ống xét nghiệm, tăm bông và dải thử nghiệm mới. Nếu có 2 kết quả không hợp lệ, hãy gọi số 1-833-784-2588.